

# ACTIVITY CHAIR

## Cadeira de atividades



Revolucionou as cadeiras adaptativas e continua a encantar os terapeutas com a sua versatilidade para pessoas de todas as formas e tamanhos, todas as condições e necessidades especiais.

A base padrão inclina 15° para frente e 15° para trás, enquanto a base alta/baixa inclina 15° para frente e 25° para trás. **Imagem 1.**

As molas opcionais do assento e do encosto na base da cadeira padrão permitem o auto-acalmamento através do movimento autogerado, ideal para clientes com autismo. **Imagem 2.**

Os apoios para os antebraços facilitam o controle da cabeça e do tronco enquanto está sentado e garantem o posicionamento distal das extremidades superiores. **Imagem 3.**

Almofadas confortáveis no assento e nas costas são essenciais para fornecer suporte acolchoado e prevenir decúbitos. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Tamanhos	Pequeno, Médio, Grande
Altura total usuário	81 a 188 cm / 32" a 74"
Largura do assento	30 a 43 cm / 12" a 17"
Assento profundo	18 a 51 cm / 20" a 74"
Altura do encosto	32 a 61 cm / 12,5" a 24"
Peso máx do usuário	34 a 113kg / 75 até 250 lbs
Acessórios	Opcional
Configurações	Nenhuma ferramenta necessária
Cores de tecido	Branco, azul, vermelho, rosa, roxo e verde

Medição do usuário necessária (Altura total)

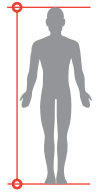

## BENEFÍCIOS

É perfeito para alimentação, terapia da fala, aprendizagem ativa e processamento sensorial.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.11P

