

# Silla de aluminio

 **coyote**



 **ONE**

Diseñada para brindar comodidad y movilidad, esta silla de ruedas de aluminio plegable y liviana cuenta con componentes ajustables y ruedas de liberación rápida para facilitar el transporte y el almacenamiento compacto. Ideal para: pacientes con cualquier necesidad de movilidad que valoren la flexibilidad y la independencia diaria.

Marco de aluminio plegable para facilitar su traslado y almacenamiento si el usuario tiene poco espacio. **Figura 1.**

El descanso de brazos es ajustable en altura para todos los usuarios. **Figura 2.**

El eje se puede ajustar en dos posiciones, en la altura y en el centro de gravedad (profundidad). **Figura 3.**

Los reposapiés son ajustables en altura, abatibles y se pueden quitar fácilmente. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2

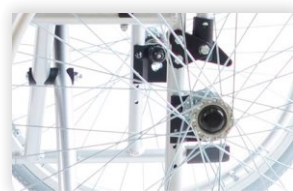


Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES



Ancho de asiento	16", 18" y 20"
Profundidad asiento	16" y 18"
Peso del producto	15.5 kg
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Rueda delantera	8"x 2" sólidas
Rueda trasera	24" neumáticas, opción sólidas Extracción rápida
Apoyabrazos	Ajustables en altura
Soporte de pies	Desmontables y ajustables
Respaldo	Tensión ajustable
Eje de ruedas	Ajustable en altura y posición

Marco plegable



Cruceta de alta calidad

Ruedas extraíbles

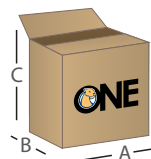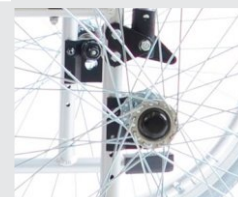

Medidas de envío

A 33"

B 13"

C 39"

Peso 18 kg.

## BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de traslado de forma ligera y segura.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

