

Q50 R

QUICKIE®



É o seu companheiro de viagem perfeito e para atividades diárias. Equipado com bateria de lítio homologada para viagens aéreas, oferece autonomia de até 12 km. e permite que seu alcance seja duplicado para 24 km.

Pesando apenas 15kg. (sem baterias) e fabricado com fibra de carbono de primeira qualidade. **Imagem 1.**

O encosto ultraleve possui estofamento respirável, permitindo ótimo fluxo de ar e regulação de temperatura. **Imagem 2.**

Dobrável em segundos, também pode ser armazenado confortavelmente nos locais mais apertados sem retirar a bateria. **Imagem 3.**

O controlador de motor sem escova nVR2 confiável e estabelecido responde com precisão aos seus comandos e ao carregamento da bateria. **Imagem 4.**

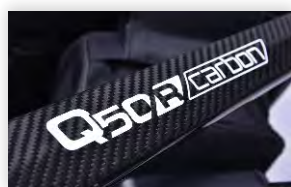


Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	17"
Profundidade assento	16.5"
Altura do encosto	18"
Peso do Produto	(sem bateria) 14.5 kg 32 lbs
Peso máx do usuário	135 kg 300 lbs
Rodas traseiras	8"
Rodas da frente	6.5"
Velocidade máxima	6 kmh 3.7 mph
Bateria	Lítio de 24 V, 10 Ah
Motor	Alta potência 250 W, sem escova
Dimensão total	(co/la/al) 36.5"/22.4"/36.3"
Dimensões dobradas	(co/la/al) 30.2"/22.4"/14.6"

Carregue mesmo quando dobrado



Luz de circulação super brilhante

5 cores que chamam a atenção



BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

